


# tb compass cleo 2



tbCompass  
Cleo II  
a misura di specifiche esigenze

 **Belmont**  
Made by hand and mind, in Japan

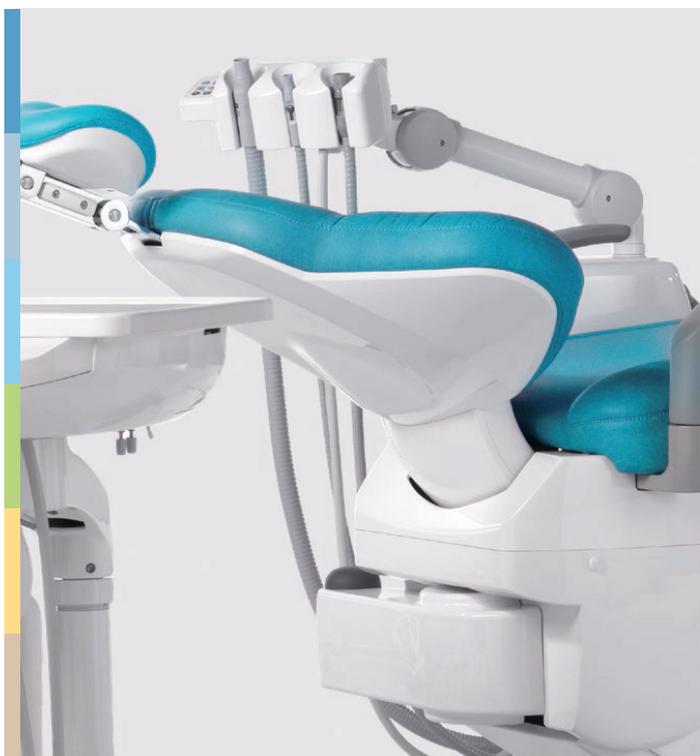

CLEO II

# 2020 reel





# Comfort & Relax

## Compatto, versatile, efficiente

Cleo II è la massima espressione dell'ingegneria Belmont per ottenere un riunito dalle alte prestazioni e di grande affidabilità per qualsiasi intervento odontoiatrico e cura. Studiato per essere un vero Centro di Trattamento Chirurgico, è progettato nei minimi dettagli e ideale per un flusso di lavoro sia a 2 che a 4 mani.

Cleo II è costruito attorno alla poltrona "Clair 90° Syncro", unica nel suo genere, a movimenti oleodinamici, silenziosa, precisa, solida e frutto di un know how tecnologico interamente Made in Japan.

- Accesso frontale ed uscita paziente facilitati
- Carico max. reale 200 kg
- Ampia escursione in altezza > 300 mm
- Gambale reclinabile e poggiatesta estensibile sincronizzati
- Poggiatesta a doppia articolazione
- Comandi joystick a pedale
-  Trendelenburg > 12°
- Rivestimento Premium



### Dal colloquio al trattamento

La compattezza del riunito, la poltrona con gambale reclinabile e la tavoletta strumenti posizionabile dietro allo schienale permettono di svolgere in modo discreto tutte le attività preliminari al trattamento, consentendo così una fase di colloquio in totale tranquillità.

Cleo II facilita il lavoro del dentista in qualunque posizione operativa, da ore 6 ad ore 12, senza impedimenti o vincoli.

### Caratteristiche tecniche

- Versione a carrello o a tavoletta medico rotante a cavi pendenti
- Portastrumenti Place Type\* anticaduta
- Ingombri minimi
- Gruppo idrico orientabile fissato alla poltrona
- Tavoletta strumenti fino a 5 alloggiamenti
- Versione per mancini su richiesta
- Lampada a LED integrata o a soffitto (fissa o a binario)

\*patent pending





# Soluzioni specifiche

## Centro di Trattamento Chirurgico (C.T.C.)

Ampi spazi, nessun ingombro, massima ergonomia per il chirurgo e comodità per il paziente, pulizia ed igiene: ecco la filosofia Belmont per una postazione chirurgica ad hoc.

- Poltrona oleodinamica e sincronizzata, con rivestimento Premium
-  Trendelenburg > 12°
- Accesso facilitato per pazienti disabili o in carrozzina
- Spazio e funzionalità per chirurgo e assistente

- Braccio assistente regolabile in altezza
- Gruppo idrico compatto con rotazione laterale a 90°
- Versione a carrello con supporto pedale
- Lampada a soffitto (fissa o a binario)
- Base poltrona con comandi joystick a pedale incorporati





#### Caratteristiche

- Braccio antideriva di precisione
- Testata lampada a triplo movimento
- Lampade a LED montate singolarmente e protette con apposito vetro
- Sensore di controllo a distanza ON/OFF e modalità composito
- Specifica conformazione delle maniglie per la movimentazione a dito singolo
- Variatore manuale luminoso d'intensità (da 4000 a 32000 lux)
- Specchio cliente incorporato su richiesta

#### Dati tecnici


- 10 LED
- Fascio di luce bianca naturale (5000 kelvin)
- Area di fuoco 85x155 mm a 650 mm di distanza dal punto focale
- Modalità composito 5500 lux
- Funzione automatica ON/OFF con preselezione posizione poltrona



#### Supporto Place Type\*

La soluzione unica per maneggiare gli strumenti con la massima disinvoltura e sicurezza. Con il sistema Belmont 'alla cieca' riporre gli strumenti non è mai stato così semplice: cordone e manipolo vengono guidati a ritroso nella sede originale senza necessità di un controllo visivo diretto. Nessun rischio di caduta, nessun cordone accavallato.

\*patent pending

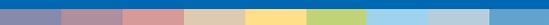

**tbCOMPASS**

# tb compass pass





# L'ambidestro multifunzione

## tbCompass: il capostipite

Sono trascorsi più di vent'anni da quando Belmont ha lanciato un sistema rivoluzionario ancora considerato un punto di riferimento per il settore.

I continui aggiornamenti tecnici e dei materiali hanno fatto sì che tbCompass oggi il riunito ideale per il dentista che vuole abbinare a qualità e affidabilità la funzione ambidestro.

Ruotare e invertire la posizione dx/sx del gruppo idrico e della tavoletta strumenti è infatti molto agevole grazie ad una particolare meccanica che permette la riconfigurazione del riunito senza fatica in soli 60 secondi.



**Dx**



**1** Per iniziare portare lo schienale della poltrona in posizione verticale e sganciare il fermo del gruppo idrico



**2** Ruotare la tavoletta strumenti di 180°



**3** Ripetere l'operazione col gruppo idrico in senso opposto, avendo cura di mantenere libere le cannule d'aspirazione durante la rotazione

**Sx**



**4** Accertarsi che il gruppo idrico sia in asse con la poltrona e agire sull'apposita leva di blocco per completare l'operazione



# Versatilità totale, mille vantaggi

## Il massimo della funzionalità

tbCompass si adatta ad ogni esigenza di lavoro mantenendo inalterate tutte le qualità tecniche Belmont. Grazie alla libera rotazione del braccio inferiore che la sorregge, la tavoletta degli strumenti può essere spostata facilmente dalla zona di accesso/uscita del paziente, prevenendo ogni possibile rischio d'interferenza dei cavi pendenti. L'assistente può quindi svolgere le necessarie attività di preparazione e igienizzazione durante la fase di colloquio, fuori dalla vista del paziente. L'opzione Place Type\* per la tavoletta medico completa in modo ottimale l'ergonomia e la funzionalità del riunito. Senza il gruppo idrico, tbCompass si trasforma in una poltrona ad uso chirurgico.

### Caratteristiche tecniche

- Poltrona modello "Contour" a movimentazione oleodinamica
- Portata d'esercizio fino a 200 kg
- Doppio o singolo comando a pedale
- Micromotore Endo di serie
- Totale componibilità del riunito: full option, con o senza gruppo idrico, a carrello, solo poltrona + tavoletta medico
- Illuminazione con o senza lampada a LED serie 900\*


\* dettagli tecnici a pag. 7



# Cleo II / tbCompass: finiture e colori

Tutti i riuniti della serie Cleo II e tbCompass sono disponibili in un'ampia e accattivante proposta cromatica per ogni esigenza di gusto e di arredo.

Tre diverse finiture: Standard, Premium e Luxury tutte realizzate con materiali antibatterici, antigraffio e antimacchia in linea con gli standard qualitativi più elevati di settore e garantiti da Belmont nei minimi dettagli.

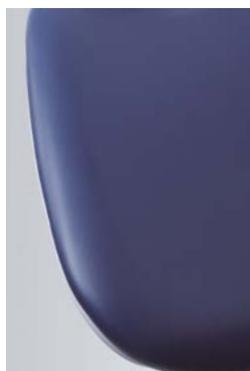


Standard



Premium



Luxury

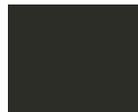							
Woodcres 554-3087	White Wash 554-0008	Cloud 554-5648	Mortar 554-5733	Char 554-5626	Sailor 554-2547	Swan 554-3811	Parfait 554-3803
							
Shore 554-3352	Cork 554-3595	Toasted Bagel 554-3444	Butterfly 554-5216	Butternut 554-5241	Campfire 554-8229	Rhubarb 554-1329	Cranberry 554-1357
							
Ember 554-5649	Blush 554-7200	Cougar 554-3209	Chestnut 554-3314	Dark Chocolate 554-3376	Sea Mist 554-4478	Tundra 554-3353	Laurel 554-4443
							
Persian Green 554-4453	Bluebird 554-2661	Capri 554-2522	Coastal 554-4530	Aubergine 554-9336	Violet 554-9395	Sky 554-2530	Blueberry 554-2711
							
Dark Kinght 554-5618							





**Takara Belmont Italy s.r.l.**

**Sede e show room:**

via Mazzacurati 4/1 - 42019 Scandiano (RE)

T. +39 0522 086 548

E. [info@belmont-dental.it](mailto:info@belmont-dental.it)

[www.belmont-dental.it](http://www.belmont-dental.it)